



SVARSTYKLĖS BH813BS

Naudojimo instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas. Tai padės pasiekti tikslaus rezultato.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Didžiausias svoris: 150 kg

Mažiausias svoris: 2,5 kg

Tikslumas: 100 g

Elementai: 3 AAA elementai

Svorio matai: kg / lb / st


Žinutė ekrane „LO“: pakeiskite elementus

Žinutė ekrane „EEEE“ arba „Err“: per didelis svoris

Naudojimo temperatūra: 5° C – 40° C

PRIETAISO APRAŠYMAS

- A. LCD ekranas
- D. Elementų skyrius

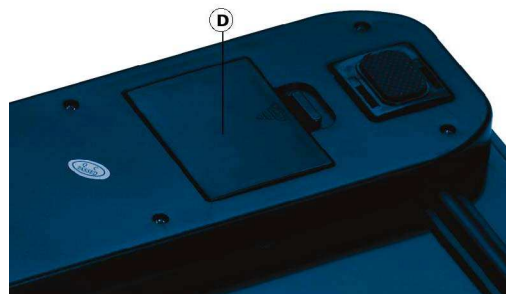

NAUDOJIMAS

- Iš elementų skyriaus išimkite plastikinę juostelę ir įdėkite elementus.
- Pasirinkite norimą svorio matą.
- Svarstyklės padėkite ant lygių kietų grindų.
- Prietaisas įsijungs ir užsidegs ekranas.
- Atsistokite svarstyklių viduryje. Tai užtikrins tikslų svorio rodymą.
- Po keleto sekundžių jūsų svoris bus parodytas ekrane.

PROBLEMOS

- Ekrane rodoma žinutė „EEEE“ arba „Err“: per didelis svoris ant svarstyklių (maks. 150 kg). Tučtuojau nulipkite nuo prietaiso, nes jis gali sugesti.
- Ekrane rodoma žinutė „Lo“: pakeiskite elementus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Venkite pernelyg didelio svorio ant svarstyklių, nes tai jas gali pažeisti.
- Neardykite prietaiso.
- Prietaisą nuvalykite sudrėkinta šluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių ir neįmerkite jo į vandenį.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ar smūgių.

PASTABOS

- Prietaiso paviršius turi būti sausas; kitu atveju, galite paslustyti.
- Nedėkite svarstyklių ant kilimų, nes svorio matavimas gali būti netikslus.
- Jei prietaiso nenaudojate, nelaikykite ant jo jokių kitų objektų.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt