

BEL Aidis MASAŽUOKLIS HOMELEC CM-05/CM-07

NAUDOTOJO VADOVAS



Belaidis, nesukeliantis skausmo ir patogus naudoti prietaisas.

Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad nepakenktumėte savo sveikatai ir turtui, ir naudokite prietaisą tik pagal nurodytą paskirtį. Nesilaikydami šių taisyklių, rizikuojate smarkiai ar net mirtinai susižeisti arba padaryti nepataisomą žalą materialiniam turtui.

Svarbios saugumo taisyklės

1. Naudokite tik kartu su prietaisu gamintojo parduodamą įkroviklį. Naudodami kitokius įkroviklius ar adapterius galite sukelti gaisrą arba sproгимą, gali nukristi elektros srovė.
2. Venkite naudoti prietaisą vairuodami, kad nesukeltumėte eismo įvykio.
3. Nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis ir nekiškite į įkroviklio lizdą metalinių daiktų, nes gali nukristi elektra.
4. Laikykite prietaisą toliau nuo šilumą skleidžiančių prietaisų, tokių kaip mikrobangų krosnelė, viryklė, įkaitę virimo prietaisai ar didelio slėgio įranga, nes gali ištekėti baterijų elektrolitas ir/arba sugesti prietaisas.
5. Nenaudokite slėgio, nebandykite išrinkti ar gręžti prietaiso arba jo baterijų, nes prietaisas gali susprogti, gali nukristi elektra arba kilti gaisras.
6. Jei pajutote neįprastą kvapą, pastebėjote iš prietaiso arba baterijų besiveržiančius dūmus arba jei prietaisas pradėjo skleisti keistus garsus, nutraukite naudojimąsi ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
7. Nenaudokite prietaiso ant įkaistančių paviršių arba šildyklės-antklodės, nes gali perkaisti baterijos, prietaisas gali susprogti arba sugesti.
8. Laikykite prietaisą vaikams ir naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.
9. Rekomenduojama temperatūra prietaisui naudoti – tarp 5°C ir 35°C. Nelaikykite prietaiso labai šaltose ar karštosiose vietose, nes jis gali sugesti ar susprogti.
10. Nenumeskite, nespauskite ir neslėkite prietaiso, nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų, nes galite jį sugadinti ir/ar pažeisti detales.
11. Neišrinkite prietaiso, nemodifikuokite ir nekeiskite prietaiso detalių, nes gali nukristi elektra, be to, prietaisui nebegalios gamintojo garantija.
12. Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį, kitaip rizikuojate jį sugadinti.
13. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur gali staigiai pasikeisti patalpos temperatūra arba kur didelė drėgmė, nes galite pažeisti prietaiso baterijas arba elektros tiekimo sistemą.
14. Nelaikykite prietaiso netoli stipraus magnetinio lauko arba ten, kur jį galėtų veikti magnetiniai laukai, nes galite pažeisti prietaiso baterijas.
15. Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, kartą per mėnesį patikrinkite prietaiso baterijas ir jas įkraukite. Jei baterijos ilgesnį laiką paliekamos neįkrautos, gali suprastėti prietaiso veikimas, prietaisas gali sugesti, susprogti ir/ar užsidegti.
16. Kultūringai naudokite prietaisą viešose erdvėse.
17. Jei prietaisą naudojate pagal komercinę paskirtį ir ilgiau nei 20 minučių, jis gali sugesti.
18. Šis prietaisas nėra žaislas ar ginklas.
19. Rekomenduojame nenaudoti šio prietaiso neštumo metu.

Gamintojo garantija

Gamintojo garantija galioja gedimams, įvykusiems normaliai naudojant produktą, ir nedengia gedimų, įvykusių dėl šių priežasčių:

- Prietaisas buvo taisomas ar modifikuojamas netinkamai arba ne pagal taisykles;
- Prietaisas sugedo dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, grubaus elgesio su prietaisu, užteršimo ar kitų panašių priežasčių;
- Prietaisas sugedo naudojant netinkamą įkroviklį ar priedus;
- Prietaiso detalės dingo arba buvo pažeistos transportavimo metu;
- Prietaisas pažeistas dėl netinkamo naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijų.

Garantija negalioja detalėms, kurios yra keičiamos arba normaliai susidėvi naudojant prietaisą, taip pat produktams be serijos numerio.

Sudedamosios dalys

1. Įkroviklio lizdas
2. Baterijos įkrovimo lemputė
3. ON/OFF indikatoriaus lemputė
4. ON/OFF mygtukas ir greičio valdiklis
5. Silikoninė rankenėlė (CM-05 modelis)
6. Masažo galvutė
7. Laikiklis
8. Silikoninė rankenėlė (CM-07 modelis)
9. Masažuoklio stovėlis
10. Kintamosios srovės įkroviklis



CM-05 / CM-07			Tik CM-07		
Galvutė su oro pagalvėle	Smaila galvutė	Šešiakampė galvutė	Galvos odos masažo galvutė	Viso kūno odos masažo galvutė	Veido masažo galvutė
Keliams, riešams, kulkšnimis ir kitiems sąnariams (kur kaulai arti odos)	Delnams ir pėdoms	Juosmeniui, nugarai, šlaunims (labiau pritaikyta raumenims nei kaulams)	Galvos odai	Odai (patepus ją aliejuku ar kremu)	Veido odai (patepus ją aliejuku ar kremu)

Prietaiso savybės

Belaidis įkraunamas masažuoklis	Masažuoklis belaidis ir įkraunamas, todėl galėsite patogiai jį nešiotis.
Ilgai neišsikraunanti ličio jonų baterijos	Ličio jonų baterijomis maitinamo masažuoklio masažavimo kokybė nėra kiek nenusileis masažui, atliktam naudojant masažuoklį, veikiantį įjungus į elektros lizdą.
Ilgai tarnaujantis, labai galingas variklis	Mažesnis ir lengvesnis variklis, kurio veikimo galimumas nėra kiek mažesnis nei įprasto variklio.

Informacija apie baterijas

- Prietaiso naudojamos baterijos: 7.2 V ličio jonų baterijos, 2200 mA, 18650 2 elementai.
- Baterijų tarnavimo laikas priklauso nuo prietaiso naudojimo dažnumo ir/ar naudojimo sąlygų.
- Baterijos, ilgai jas naudojant, tampa nebetinkamos naudoti. Jei baterijų tarnavimo laikas sutrumpėja perpus palyginti su naujomis, rekomenduojame kreiptis į klientų aptarnavimo centrą, kad įsigytumėte naujas.
- Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, įsitinkinkite, kad jis yra išjungtas, ir reguliariai tikrinkite jo baterijas, kad įsitikintumėte, jog jos neištekėjo. Tokiu būdu baterijos tarnaus ilgiau.
- Baterijoms kenkia drėgmė ir jos lengvai užsidega. Todėl laikykite jas toliau nuo karščio ir šilumos šaltinių ir nenaudokite prietaiso vietose, kuriose aukšta aplinkos temperatūra.


- Laikykite prietaisą išjungtą ir vėsioje vietoje.

Galvučių prijungimas ir prietaiso įkrovimas



1. Priklausomai nuo to, kurią kūno vietą norite masažuoti, prijunkite reikiamą masažuoklio galvutę.
2. Spustelėjus ON mygtuką, turėtų įsižiebt žalia indikatoriaus lemputė. Tarp prietaiso įjungimo ir lemputės įsižiebtimo gali praeiti maždaug dvi sekundės. Nustatykite norimą greitį ir pradėkite masažuoti. Nepamirškite, kad prietaisas turėtų būti išjungtas iš įkroviklio, nes kitaip jis neveiks.
3. Jūsų saugumui prietaisas automatiškai išsijungs ir nustos veikęs, jei bus per didelė apkrova. Tokiu atveju pirmiausia išjunkite prietaisą, jei jis vis dar įjungtas, įjunkite įkroviklį į elektros lizdą ir tada sujunkite su prietaisu. Palaukite maždaug tris sekundes ir tada išjunkite tiek įkroviklį, tiek prietaisą. Pradėkite masažuoti.
 - a. Baterijos pakaks be pertraukos masažuoti 120 minučių (jei nėra apkrovos).
 - b. Baterijos patikrintos gamintojo laboratorijose su gamintojo įranga.
 - c. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo pobūdžio ir/ar aplinkos sąlygų.
4. Įstatykite adapterio, kurį įsigijote kartu su prietaisu, kištuką į elektros lizdą. Nuimkite įkrovimo dangtelį ir prijunkite įkroviklį. Raudona indikatoriaus lemputė reiškia, kad prietaisas kraunasi.
5. Žalia indikatoriaus lemputės švieselė reiškia, kad įkrovimas baigtas. Ištraukite įkroviklį ir vėl uždenkite prietaisą dangteliu.

Vibracinis masažas (tik CM-07 modelyje)

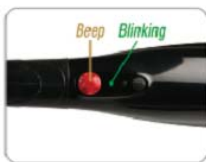

1. Pasukite valdiklį ir nustatykite „0“ greitį. Automatiškai užsidegs raudona indikatoriaus lemputė ir po 10 sekundžių pasigirs pypsėjimas.
2. Šis pypsėjimas reiškia, kad įsijungė rankenėlės gale esanti vibracinė galvutė. Valdikliu nustatykite reikiamą greitį.
3. Galėsite prijungti odos, galvos odos ir veido masažo galvutes.
 - a. Pernelyg didelė prietaiso apkrova masažo metu gali aktyvuoti saugiklį, kuris išjungs prietaisą. Tokiu atveju išjunkite prietaisą ir vėl jį įjunkite. Jei prietaisas vis tiek neveikia, prijunkite įkroviklį ir išjunkite po 2-3 sekundžių.
 - b. Jei prietaisas buvo ilgesnį laiką nenaudojamas ir laikomas vėsioje patalpoje, pirmas 10 minučių nepersistenkite masažuodami, nes gali staiga sustoti variklis.

Kintamosios srovės įkroviklio techniniai duomenys

Įeinanti srovė: 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 0.4 A (max)

Išeinanti srovė: 8.5 V pastovioji srovė, 1 A

Įkrovimo laikas: 120 minučių

Dėmesio: naudokite tik gamintojo kartu su prietaisu parduodamą įkroviklį. Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo aplinkos sąlygų, bet dažniausiai yra 120 minučių.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt