

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MASAŽUOKLIS LY-606A

NAUDOTOJO VADOVAS

Patentuotas produktas – draudžiama imituoti ir kopijuoti. Išsaugokite šį naudotojo vadovą.
Jmonei suteiktas ISO9001:2000 sertifikatas.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudotojo vadove pateiktas instrukcijas, ypač saugumo perspėjimus. Išsaugokite šį naudotojo vadovą. Ačiū, kad pasirinkote mūsų produktą.

Masažo principai

Masažas – vienas iš tradicinės kinų medicinos kūno gydymo ir sveikatos palaikymo metodų. Sukoncentruotas į tam tikrus kūno taškus, įvairių technikų masažas gali padėti įveikti ligas ir negalavimus, atpalaiduoti raumenis ir sutvirtinti kūną. Masažas užtikrina sveiką organizmo funkcionavimą, biologinės informacijos perdavimą, tinkamą organizmą sudarančių audinių bei organų išsidėstymą ir pan. Masažas – puiki ligas įveikti padedanti priemonė, populiarūs visame pasaulyje.

Anot kinų medicinos teorijų, kūno paviršius yra susijęs su vidiniais organais įvairiais kanalais ir taškais. Jei prastai funkcionuoja vidiniai organai, ligos požymius galima pastebėti kūno išorėje. Masažuojant ir stimuliuojant kūno paviršių, informacija perduodama į vidinius organus, kurių funkcija sustiprinama ir pagerinama.

Masažas, paremtas naujausiomis žiniomis apie kūno anatomiją, turi teigiamą poveikį imunitetui, skatina uždegimų gijimą, sumažina raumenų spazmus ir skausmą.

Tūkstantmetė patirtis rodo, kad masažas turi teigiamą poveikį uždegimų, žaizdų ir kaulų gijimui, mažina raumenų spazmus, taip pat padeda gydant hiperplaziją, parenchimą ir fibrozę.

Prietaiso paskirtis

- Sumažinti nuovargį, atpalaiduoti pavargusius raumenis.
- Sumažinti dėl prastos kraujo cirkuliacijos atsiradusį skausmą.
- Padėti sustingusiems kaklo ir pečių raumenims, sumažinti raumenų spazmus.
- Sumažinti dėl nuovargio ar reumato atsiradusį skausmą.
- Tinka visoms kūno dalims masažuoti.
- Intensyvi infraraudonųjų spindulių šilumos terapija.
- Iš dalies skatina lieknėjimą ir riebalų skaidymą.
- Prietaisui per daug įkaitus, automatinis nuo perkaitimo saugantis saugiklis nutrauks prietaiso variklio darbą. Išjunkite prietaisą ir leiskite jam keletą minučių atvėsti. Tada galėsite tęsti masažavimą.


Saugumo perspėjimai

1. Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
2. Nenaudokite prietaiso labai drėgnose vietose ir patalpose.
3. Prižiūrėkite prietaisą naudojančius vaikus ir neįgaliuosius.
4. Jei pastebėjote prietaiso gedimą, nebandykite jo taisyti patys. Nutraukite prietaiso naudojimą ir nuneškite prietaisą į įgaliojimą aptarnavimo centrą.

Techniniai duomenys

Įtampa	220/240 V	
Galia	≤22 W	
Dažnis	50-60 Hz	
Vibracijos	Didelis greitis	3200 aps./min.
	Mažas greitis	2600 aps./min.

Masažo zonos

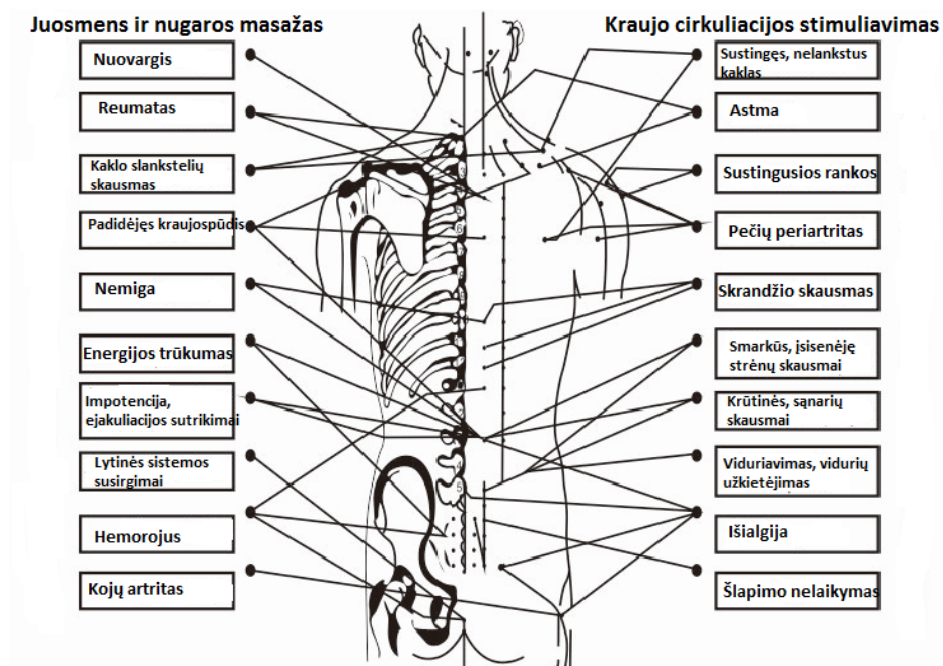

Žmogaus kūne tarp kaklo ir juosmens yra 650 masažui tinkamų taškų, susietų su tam tikrais organais ir ligomis. Masažas skatina kraujo cirkuliaciją, metabolizmą, padeda sustiprinti imunitetą. Lengvai naudojamas masažuoklis užtikrins masažavimo malonumą ir padės išsaugoti sveikatą.

Trikdžių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Neveikia variklis.	Kištukas neįjungtas į rozetę.	Įstatykite prietaiso kištuką iš rozetę.
	Mygtuku neįjungėte prietaiso.	Įjunkite prietaisą.
Suveikė nuo perkaitimo saugantis saugiklis.	Per ilgai naudojate prietaisą.	Palaukite 30 min.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt