

# Panasonic®

Naudojimo instrukcija  
(Buitinis) Burnos irigatorius  
Modelio Nr. EW1311





Naudojimo instrukcija  
(Buitinis) Burnos irigatorius  
Modelio Nr. EW1311

## Turinys

---

<b>Sauga .....</b>	<b>6</b>	<b>Dažnai užduodami klausimai.....</b>	<b>15</b>
<b>Paskirtis.....</b>	<b>9</b>	<b>Gedimų šalinimas.....</b>	<b>15</b>
<b>Dalių identifikavimas.....</b>	<b>10</b>	<b>Baterijos tarnavimo laikas.....</b>	<b>16</b>
<b>Įkrovimas.....</b>	<b>10</b>	<b>Įmontuotos įkraunamos baterijos</b>	
<b>Kaip naudotis.....</b>	<b>11</b>	<b>išėmimas .....</b>	<b>16</b>
<b>Po naudojimo.....</b>	<b>13</b>	<b>Techniniai duomenys .....</b>	<b>17</b>
<b>Valymas .....</b>	<b>14</b>	<b>Purkštuko keitimas</b>	
		<b>(parduodamas atskirai).....</b>	<b>17</b>

Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ gaminį.

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

## Dėmesio!

- Nemerkite įkroviklio į vandenį ir neplaukite jo vandeniui. Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl trumpojo jungimo.
- Valydami įkroviklį, visada ištraukite maitinimo laido kištuką iš namų lizdo. Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima susižaloti.
- Maitinimo laido negalima pakeisti. Jei įkroviklis sugadintas, prietaisą reikia išmesti. Priešingu atveju gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima susižaloti.
- Prižiūrimi, burnos irigatorius gali naudoti nuo 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutimo arba protinių sutrikimų arba patirties bei žinių trūkumą.

- Burnos irigatorių galima naudoti tik su šaltu arba šiltu vandeniu arba specialiais tirpalais, nurodytais gamintojo instrukcijose.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Nenaudokite kitokio adapterio, išskyrus pridedamą įkroviklį. Be to, su įkrovikliu nekraukite kitų gaminių. (Žr. 10 psl.) Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl užtrumpinimo.
- Šis simbolis rodo, kad elektros prietaisui jungti prie tinklo reikalingas atskiras nuimamas maitinimo įtaisas. Maitinimo įtaiso tipo nuoroda nurodyta šalia simbolio.






## Sauga


Siekiant sumažinti rimto arba mirtino sužalojimo, elektros smūgio, gaisro pavojų ir žalos įrangai arba turtui pavojų, visada laikykitės šių atsargumo priemonių.


### Simbolių paaiškinimas

Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti pavojus, sužalojimus ir turčinę žalą, kuri atsiranda, nesilaikant nurodymų ir netinkamai naudojant prietaisą.

 <b>PAVOJUS</b>	Žymi galimą pavojų, kada galima sunkiai susižeisti arba žūti.
 <b>ĮSPĖJIMAS</b>	Žymi galimą sunkių arba mirtinų traumų pavojų
 <b>DĖMESIO</b>	Reiškia pavojų nesmarkiai susižeisti arba sugadinti turtą.

Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti nurodymus, kurių reikia laikytis.

 Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam tikrą veiksmą, kurio atlikti negalima.

 Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam tikrą veiksmą, kurį reikia atlikti, norint saugiai valdyti prietaisą.



## ĮSPĖJIMAS

### ► Nelaimingų atsitikimų vengimas

Laikykite vaikams arba kūdikiams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite jiems naudoti prietaiso.



- Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą arba žalą atsitiktinai prarijus nuimamas dalis.

### ► Maitinimas

Neįjunkite arba neatjunkite maitinimo laido į / iš namų lizdo šlapiomis rankomis.



- Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.

Nedėkite įkroviklio virš arba netoli pilnos vandens kriauklės arba vonios.

Nenaudokite, kai laidas arba maitinimo kištukas yra pažeistas, arba kai namų lizdas yra laisvas.

Negadinkite, nekeiskite, nelankstykite per jėgą nesukite, netraukite, nestumkite ar netampykite laido bei kištuko.



Be to, nedėkite nieko sunkaus ant maitinimo laido ei kištuko ir jų nežnybkite.

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl trumpojo jungimo.

Naudokite tik butyje ir nenaudokite, jei prietaiso parametrai neatitinka buitinio elektros tinklo parametrų.



- Viršijus buitinio elektros tinklo parametrus, lizdas gali sukelti gaisrą, nes prietaisas gali perkaisti.



## ĮSPĖJIMAS

Prietaisą visada reikia jungti į elektros tinklą, kurio vardinė įtampa yra tokia, kaip nurodyta ant įkroviklio. Iki galo įkiškite maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju, gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.

### ► Prietaisui veikiant nenormaliai arba sugedus

**Nedelsiant nebenaudokite ir ištraukite maitinimo kištuką, jei yra triktis arba gedimas.**

- Priešingu atveju galima susižaloti, gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.

**< Gedimai ir neįprastas veikimas >**



- Pagrindinis blokas, įkroviklis arba laidas yra deformuoti arba neįprastai karšti.
- Pagrindinis blokas arba įkroviklis smirda degėsiais.
- Pagrindinio prietaiso naudojimo arba įkrovimo metu iš įkroviklio arba laido girdisi nenormalus garsas.
- Iškart patikrinkite arba suremontuokite jį įgaliotame techninės priežiūros centre.

### ► Šis gaminys

Šis gaminys turi įmontuotą įkraunamą bateriją. Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.



- Taip jis gali perkaisti, atsirasti nuotėkis arba sprogti.

**Prietaiso patys nepermontuokite ir neperdirbkite.**



- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą. Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą (baterijos keitimas ir t.t.).



**Neardykite, išskyrus atvejus, kai išmetate gaminį.**

- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.

### ► Valymas

**Reguliariai valykite maitinimo kištuką, kad nesikauptų dulksės (kartą per pusę metų).**



- To nepadarius, gali kilti gaisras dėl drėgmės sugadintos izoliacijos.

Atjunkite maitinimo laidą ir nuvalykite sausu skudurėliu.



## DĖMESIO

### ► Apsauga nuo dantenų ir dantų pažeidimų

**Asmenys, nemokantys naudoti šio prietaiso, neturėtų jo naudoti.**



**Asmenys su sutrikusiu rijimo refleksu neturėtų naudoti šio prietaiso.**

- Tokiu būdu galima sužeisti arba pažeisti dantis ir dantenas.

**Asmenys, kurie gali turėti periodonto ligų, kurių dantys yra gydomi, arba kurie yra susirūpinę dėl burnoje esančių simptomų, prieš naudodami šepetėlį turėtų pasikonsultuoti su dantų gydytoju.**



- To nepadarius, galima sužaloti arba pažeisti dantis ir dantenas.



# DĖMESIO

## ► Šis gaminys



**Nenaudokite šio prietaiso kitiems tikslams nei burnos valymas.**

- Taip darant galima susižeisti, kai vandens srautas bus nukreiptas į akis, nosį, ausis, arba gerklę.



**Nepildykite bakelio vandeniu, šiltesniu nei 40 °C.**

- Taip galima nusideginėti.



**Nesidalinkite purkštuku su savo šeima ar kitais asmenimis.**

- Kitaip galite gauti infekciją arba uždegimą.



**Nedėkite metalinių daiktų, pvz., monetų arba sąvaržėlių ant įkroviklio.**

- Jie gali per daug įkaisti ir sukelti nudegimus.

## ► Atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones



**Neleiskite prie elektros kištuko prilipti metaliniams daiktams ar šiukšlėms.**

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl trumpojo jungimo.



**Negalima mėtyti ir trankyti prietaiso.**

- Taip galite susižaloti.



**Negalima apvynioti laido aplink įkroviklį laikymo metu.**

- Taip laidas gali sulūžti ir sukelti gaisrą dėl trumpojo jungimo.

**Jei ilgą laiką nenaudojate, atjunkite maitinimo kabelį nuo buitinio lizdo.**



- To nepadaryę, galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl elektros nuotėkio ir apgandintos izoliacijos.



**Atjunkite maitinimo laidą, laikydami už kištuko, o ne laido.**

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl trumpojo jungimo.



**Po naudojimo visada sutvarkykite ir išvalykite prietaisą. (Žr. 14 psl.)**

- To neatlikus, susikaupę pelėsiai ir bakterijos gali pakentti jūsų sveikatai.



### PAVOJUS


- Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su šiuo prietaisu. Nenaudokite baterijų su kitais gaminiais.
- Negalima įkrauti baterijos, kai jis išimtas iš gaminio.
- Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
- Patys nelituokite, neardykite ir nekeiskite baterijos.
- Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės juostelės ant baterijos liestųsi su kitais metaliniais daiktais.
- Nenešiokite ir nelaikykite baterijų kartu su metalo papuošalais, pavyzdžiui, karoliais ir plaukų segtukais.
- Nenuļupkite vamzdelio.
  - Taip jis gali perkaisti, atsirasti nuotėkis arba sprogti.

**Baterijoje yra šarminis skystis. Jam patekus į akis, netrinkite aki ir kruopščiai plaukite švarių, pvz., vandentiekio vandeniu.**

- To nepadarius, gali susilpnėti regėjimas. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

### ĮSPĖJIMAS

**Nuėmę įkraunamą bateriją, laikykite ją vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.**

-  - Baterija kenkia organizmui, ją atsitiktinai nurijus. Jei taip atsitinka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.


**Baterijoje yra šarminis skystis. Patekus ant odos ar drabužių, plaukite švarių, pvz., vandentiekio vandeniu.**

- To nepadarius, galima susižaloti odą.

### Paskirtis

- Į vandens bakelį nedėkite druskos, burnos skalavimo skysčio ar kitų cheminių medžiagų. Taip galite sukelti gedimą.
- Nedžiovinkite pagrindinio bloko su džiovituvu ar ventiliatoriaus šildytuvu. To nepadarius galima sugadinti prietaisą arba sulankstyti jo dalis.
- Nevalykite naudodami skiediklių, benzino, alkoholio ir t.t. Jie gali sugadinti korpusą, sukelti jo skilinėjimą arba pakeisti jo spalvą.
- Po naudojimo vietoje laikykite prietaisą sausoje patalpoje. Jei prietaisą paliksime vonioje, gali kilti gedimas.

## Dalių identifikavimas

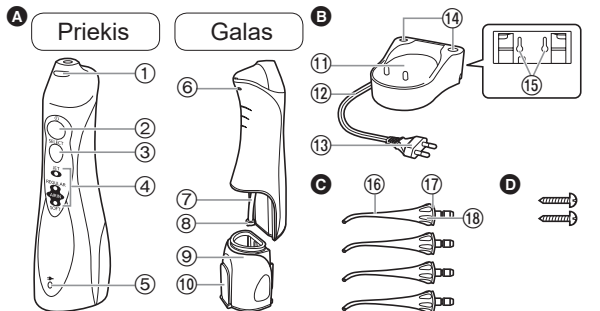

### A Pagrindinis blokas

- ① Purkštuko atleidimo mygtukas
- ② Maitinimo mygtukas
- ③ Režimo perjungimas
- ④ Režimo indikatorius
- ⑤ Krovimo būsenos lemputė
- ⑥ Vėdinimo anga
- ⑦ Siurbimo žarna
- ⑧ Filtras
- ⑨ Vandens bakelis
- ⑩ Vandens bakelio dangtelis

### B Įkroviklis (RE8-47/RE8-53) (Elektros šakutės forma skiriasi, priklausomai nuo regiono.)

- ⑪ Įkrovimo skyrius

- ⑫ Laidas
  - ⑬ Maitinimo tinklo kištukas
  - ⑭ Purkštukų stovai
  - ⑮ Išgręškite skylės sienoje montavimas
- Įkroviklį galima montuoti ant sienos naudojant du medvaržčius.

### C Purkštukas (x4)

- ⑯ Purkštukas
- ⑰ Identifikavimo žiedelis
- ⑱ Purkštuko rankena

Standartinių priedų kompleksas

### D 2 varžtai


## Pastaba

Pagrindiniame bloke (vandens bakelyje ir siurbimo žarnoje) gali būti drėgmės, likusios iš distiliuoto vandens atliekant produkto patikrinimą.

## Įkrovimas

### ► Ant vonios stalviršio ar ant lentynos


1. Padėkite laidą dešinėje, centre arba kairėje laido kreipiklio, priklausomai nuo to, kur bus laikomas įkroviklis.
2. Padėkite įkroviklį ant lygaus, tvirto paviršiaus.
3. Įkiškite maitinimo laidą į tinklą.

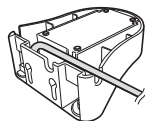

### 1 Įdėkite pagrindinį bloką taip, kad jis stovėtų vertikaliai įkrovimo skyriuje.

Užsidegs įkrovimo indikatorius.

- Būtinai statykite prietaisą vertikaliai. Jei prietaisas yra pasviręs arba tiesiogiai nesiliečia su įkrovikliu, jis negalės tinkamai įsikrauti.
  - Įkrovimas baigiasi maždaug po 15 val.
  - Lemputė neišsijungia net ir tada, kai baigiasi įkrovimas..
  - Su visiškai įkrauta baterija prietaisą galima naudoti apie 15 minučių.
- (Baterijoms senstant, prietaiso veikimo laikas trumpėja).

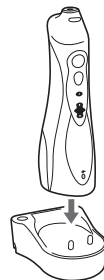

## 2 Atjunkite maitinimo laidą, kai įkrovimas bus baigtas.

(saugumo sumetimais ir siekiant sumažinti energijos suvartojimą)

- Baterija veiks gerai, net ją įkrovus ilgiau nei 15 valandų.

### Pastabos

- Pirmą kartą naudojant prietaisą arba jei jis nenaudojamas ilgiau nei pusę metų, įkrovimo indikatorius gali įsijungti keletą minučių po įkrovimo pradžios arba veikimo laikas gali sutrumpėti. Tokiais atvejais įkraukite bateriją 23 valandas arba ilgiau.
- Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra 0–35 °C. Baterija gali veikti blogiau kitoje nei rekomenduojama temperatūroje.

## Kaip naudotis

### 1 Tvirtai uždėkite purkštuką ant pagrindinio bloko.



### 2 Atidarykite vandens bakelio dangtelį, laikydami pagrindinį bloką taip, kad jis būtų lygus, ir užpildykite bakelį vandeniu.




- Visada naudokite šviežią vandentiekio vandenį arba drungnų vandenį.
- Jei vanduo šaltas, naudokite drungną vandenį, kurio temperatūra yra 40 °C arba žemesnė.

### 3 Užsukite vandens čiaupą ir paspauskite taip, kad užsifikuotų



### 4 Paspauskite režimo jungiklį ir pasirinkite norimą vandens srovės režimą.

- Režimo indikatorius degs ir rodys anksčiau pasirinktą režimą. Jei prietaisas nenaudojamas ilgiau nei 30 dienų arba jei jis buvo visiškai išsikrovęs ir tada įkrautas, režimas pradamas nuo švelnaus oro ir vandens purškimo AIR IN (SOFT). (baterijai išsekus, režimas bus nustatytas iš naujo, bet tai nėra gedimas.)
- Jei norite naudoti kitą režimą, spauskite režimo jungiklį, kol režimas pasikeis į norimą nustatymą. Paspaudus režimo jungiklį, režimas bus pakeistas iš AIR IN (SOFT) į AIR IN (REGULAR) ir į JET.

Veiksena	Aprašas
	<b>JET režimas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šis režimas skirtas pašalinti maisto daleles iš tarpdančių</li> </ul>
	<b>AIR IN (REGULAR) režimas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šis režimas skirtas periodonto kišenių valymui ir dantenų priežiūrai.</li> </ul>
	<b>AIR IN (SOFT) režimas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šis režimas skirtas švelniai masažuoti dantenas</li> </ul>


### Pastabos

- Kai naudojate prietaisą pirmą kartą, paspauskite veikimo mygtuką, įjunkite įrenginį ir išbandykite kiekvieną vandens purškimo režimą, pripildę bakelį vandens.
- Prietaisas negali veikti maždaug 5° arba žemesnėje aplinkos temperatūroje.
- Nespauskite puršktuvo antgalio prie dantų ar dantenų.
- Kadangi apnašų, prilipusių prie dantų paviršiaus, negalima pašalinti vien vandens srautu, visada reikia jas valyti ir šepetėliu. Išvalius dantis rekomenduojama išskalauti burną vandens srove.
- Nenaudokite tuščio prietaiso, išskyrus kai išpilate likusį vandenį po naudojimo. Naudojant prietaisą be vandens, jis gali sugesti.

## 5 Prieš paspausdami maitinimo jungiklį, įdėkite purkštuką į burną ir švelniai užsičiaupkite.

- Norėdami naudoti, pasilenkite virš praustuvo, pagrindinį bloką laikydami vertikaliai, o purkštuką viršuje, ir pakelkite alkūnę.
- Paspaudus režimo jungiklį naudojimo metu galima pakeisti režimą.
- Visiškai pilno vandens bakelio pakanka maždaug 35 sekundėms.
- Jei purkštukas yra per daug pasviręs, iš ventiliacijos angos vietoj puršktuvo tekės vanduo. (Ventiliacijos anga prietaiso gale leidžia žarnai lengviau siurbti vandenį).

**Pasukite puršktuvo rankenėlę, kad sureguliuotumėte vandens srauto kryptį.**

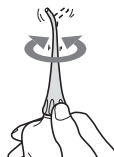

## 6 Po naudojimo paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

- Nustokite naudoti purkštuką jį tebelaikydami burnoje, kad neapsitaškytumėte.

### ► Tarpdančių valymas

#### JET režimu

- Nukreipkite vandens srautą į tarpdančių zoną Δ.
- Nukreipkite iš priekinių ir galinių dantų pusių.



### ► Periodonto kišenių valymas

#### AIR IN (REGULAR) režimu

- Nukreipkite vandens srautą į tarpą tarp dantų ir dantenų.
  - Lėtai perkeltkite vandens srautą išilgai dantenų.
  - Išvalykite dantis iš priekinės ir užpakalinės pusės, taip pat už krūminių dantų.
  - Valykite visas skausmingas dantenų sritis AIR IN (SOFT) režimu.
- \* Periodonto kišenių negalima valyti JET režimu, nes vandens srautas yra per stiprus.



### ► Dantų priežiūra



#### AIR IN (REGULAR) režimu

- Stimuliuoti dantenas.
- Švelniai stimuliuokite visas skausmingas dantenų sritis AIR IN (SOFT) režimu.




## Po naudojimo

1. Atidarykite vandens bakelio dangtelį ir išpilkite vandenį.
  - Kiekvieną kartą po naudojimo išpilkite vandenį iš bakelio.
2. Įjunkite maitinimo jungiklį ir išleiskite vandenį.
  - Leiskite prietaisui veikti tol, kol vanduo nustos tekėti, tada išjunkite maitinimo jungiklį.
3. Įkiškite pagrindinį bloką į įkroviklį.
4. Laikydami nuspaustą purkštukų atleidimo mygtuką, ištraukite purkštuką iš prietaiso ir padėkite ant purkštuko stovo.

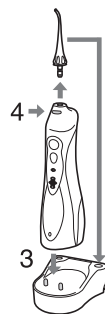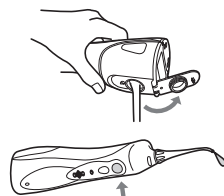

## Valymas

1. Patraukite vandens bakelį žemyn.

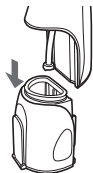


2. Išplaukite vandeniu.




- Nuimkite identifikavimo žiedą ir nuplaukite.
- Neplaukite karštesniu kaip 50 °C vandeniu.
- Jei naudojate ploviklį, naudokite tą, kuris tinka indams plauti.  
Gerai nuskalaukite vandeniu, kad išvalius neliktų ploviklio.
- Nusausinkite rankšluosčiu ir palikite išdžiūti gerai vėdinamoje vietoje.

**Nušveiskite nuvalykite siurbimo žarnos purkštuko filtrą minkštu šepčiu.**

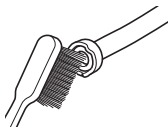

3. Nusausinkite rankšluosčiu ir pan. ir išdžiovinkite.

4. Sulygiuokite ir pastumkite vandens bakelį išilgai griovelio, ir tvirtai įdėkite į vietą.

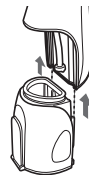

Šluoste nušluostykite dėmes ant įkroviklio.

- Niekada nenaudokite skiediklių, benzino arba alkoholio, nes jie gali sugadinti dalis arba sukelti skilinėjimą bei spalvos pasikeitimus.
- Neplaukite įkroviklio.
- Maždaug kartą per šešis mėnesius nuvalykite elektros kištuko liežuvėlį sausa šluoste.



## Dažnai užduodami klausimai

Klausimas	Atsakymas
Ar po ilgo nenaudojimo laikotarpio baterija išseks?	Kai prietaisas nenaudojamas 6 arba daugiau mėnesių, baterija susilpnėja (nuteka baterijos skystis ir t.t.). Iki galo įkraukite bateriją kartą į 6 mėnesius.
Ar reikia bateriją įkrauti prieš kiekvieną naudojimą?	Taip, tačiau rekomenduojama įkrauti bateriją, kai ji visai išseks. Baterijos tarnavimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo trukmės ir laikymo sąlygų.

## Gedimų šalinimas

Problema	Galima priežastis	Veiksmas
Prietaisas neveikia.	▶ Ką tik įsigijote šį gaminį arba jo nenaudojote daugiau nei 6 mėnesius	▶ Įkraukite pagrindinį bloką ne mažiau kaip 23 val. (Žr. 11 psl.)
Prietaisą galima naudoti tik kelias minutes, net jei jis įkrautas.	▶ Įkrovimo laikas yra trumpas.	▶ Pastatykite pagrindinį bloką vertikaliai taip, kad jo pagrindas liestųsi prie įkrovimo skyriaus.
	▶ Pagrindinis blokas įdėtas į įkroviklį ne vertikaliai. (Žr. 10 psl.)	▶ Baigėsi baterijos tarnavimo laikas. (Žr. 16 psl.)
	▶ Baigėsi baterijos tarnavimo laikas (apie 3 metai).	
Žemas vandens slėgis.	▶ Purkštukas užsikimšo.	▶ Pakeiskite purkštuką.
	▶ Purkštuko žiotys suspaustos.	▶ Išvalykite filtrą. (Žr. 14 psl.)
	▶ Filtras užsikimšo.	
Vanduo neišteka.	▶ Naudojimo metu pagrindinis blokas laikomas pernelyg pakreiptas.	▶ Naudodami, laikykite pagrindinį bloką vertikaliai. (Žr. 12 psl.)

Jei problemų išspręsti nepavyko, kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį įrenginį arba į „Panasonic“ įgaliotą remonto paslaugų centrą.

## Baterijos tarnavimo laikas

Baterijos tarnavimo laikas yra apie 3 metai, kai ji įkraunama maždaug kartą per savaitę (kai ji naudoja vienas asmuo).

Jei veikimo laikas yra labai trumpas net visai įkrovus bateriją, vadinasi, ji susidėvėjo.

(Baterijos veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo arba laikymo sąlygų)

Pakeiskite bateriją įgaliojame techninės priežiūros centre.


## Įmontuotos įkraunamos baterijos išėmimas

**Prieš išmesdami prietaisą, išimkite įmontuotą įkraunamą bateriją.**

Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę, jei tokia yra. Šis skaičius turi būti naudojamas tik išmetant prietaisą ir negali būti naudojamas jį remontuoti. Jei patys ardysite prietaisą, jis nebebus nelaidus vandeniui ir gali blogai veikti.

- Išimdami bateriją, išimkite prietaisą iš įkroviklio.
- Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą, ir laikykite įjungę, kol baterija visiškai išsikraus.

- Atlikite veiksmus nuo ① iki ⑥ ir pakelkite bateriją, tada ją išimkite.
- Stenkitės neužtrumpinti išimtos baterijos teigiamo ir neigiamo polių ir izoliuokite polius, uždengdami juos lipnia juosta.

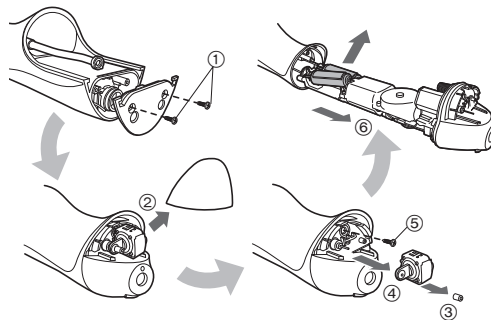

### Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų perdirbimas

Šiame prietaise yra nikelio-metalo hidrido baterija. Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę.



## Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis	Žr. gaminio techninių duomenų plokštelę. (Automatinė įtampos konversija)
Krovimo laikas	Maždaug 15 val.
Galios sąnaudos	Apie 1 W
Siurblio dažnis	Maždaug 1400 impulsų per minutę *
Vandens slėgis	<b>ČIURKŠLĖ:</b> Maždaug 590 kPa (apie 6,0 kgf/cm <sup>2</sup> ) <b>AIR IN (REGULAR):</b> Maždaug 390 kPa (apie 4,0 kgf/cm <sup>2</sup> ) <b>AIR IN (SOFT):</b> Maždaug 200 kPa (apie 2,0 kgf/cm <sup>2</sup> )
Veikimo laikas	Maždaug 15 min* (20 °C, kai visiškai įkrautas)
Bakelio tūris	Maždaug 130 ml (apie 35 sek.*)
Matmenys	Pagrindinis blokas: 197 (aukštis) x 59 (plotis) x 75 (gylis) mm (Neįskaitant purkštuko) Įkroviklis: 40 (aukštis) x 93 (plotis) x 98 (gylis) mm
Svoris	Pagrindinis blokas: Apie 305 g (Įskaitant purkštuką) Įkroviklis: Apie 180 g
Akustinis triukšmas ore	65 (dB (A) esant 1 pW)

\* Naudojant AIR IN (REGULAR) režimu  
Šis prietaisas skirtas naudoti tik butyje.

## Purkštuko keitimas (parduodamas atskirai)


- Jei purkštuko antgalis deformuojasi, pakeiskite jį nauju.
- Purkštukas yra susidėvinti dalis. Dėl higienos priežasčių purkštuką reikia pakeisti nauju kas 6 mėnesius, net jei jo forma ir nepasikeitė.
- Papildomos purkštuko galvutės su identifikavimo žiedu, leidžiančios keliems asmenims dalintis pagrindiniu bloku.



Naujas purkštukas  
(antgalis)



Deformuotas (susidėvėjęs)  
purkštukas (antgalis)

Dalies numeris	Atsarginis purkštukas, skirtas EW1311	
EW0950	Purkštukas	

## Senos įrangos ir baterijų utilizavimas Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų perdirbimo sistemas



Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu su buitiniemis atliekomis.

Norint apdoroti, perdirbti ir tinkamai panaudoti senas baterijas ir senus prietaisus, nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės aktus. Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio. Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą teiraukitės vietos valdžios įstaigos.

Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.



### **Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinis simbolis)**

Šis simbolis gali būti vartojamas su cheminiu simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimus.

„Panasonic“ gaminys

Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija

Prašome išsaugoti pirkimo kvitą

Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš [www.panasonic.com/lt](http://www.panasonic.com/lt) arba skambinkite šiais numeriais:

52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo



Panasonic Corporation  
<http://www.panasonic.com>  
© Panasonic Corporation 2019