

Panasonic

Naudojimosi instrukcijos
(Buitinis) burnos drėkintuvas
Modelio Nr. EW1411



Lietuviškai **3**

Naudojimosi instrukcijos
(Buitinis) burnos drėkintuvas
Modelio Nr. EW1411

Turinys

Atsargumo priemonės	6	Dažnai užduodami klausimai	14
Paskirtis.....	9	Trikčių diagnostika	14
Dalių identifikavimas	9	Baterijos tarnavimo laikas.....	15
Įkrovimas	10	Integruotos įkraunamos baterijos	
Kaip naudotis	10	išėmimas	15
Po naudojimo	13	Specifikacijos	16
Valymas	13	Antgalio keitimas (parduodamas	
		atskirai).....	16

Dėkojame, kad įsigijote šį „Panasonic“ produktą.

Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

Dėmesio!

- Neįmerkite įkroviklio į vandenį ir neplaukit vandeniu. Dėl to galite nusikrėsti elektra arba sukelti trumpą jungimą.
- Visada atjunkite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo prieš valydami įkroviklį.
To nepadarius galite nusikrėsti elektra ar susižaloti.
- Maitinimo laidas yra nekeičiamas. Jei laidas pažeistas, įkroviklis turi būti išmestas.
To nepadarius galite sukelti nelaimingą atsitikimą arba susižaloti.
- Oraliniais drėkintuvais leidžiama naudotis vaikams nuo 8 metų ir asmenims su fizine, sensorine arba protine negalia ar nepakankamomis žiniomis apie tokio prietaiso naudojimą su priežiūra.

- Burnos drėkintuvai gali būti naudojami tik su šaltu arba karštu vandeniu, arba specialiais tirpalais, kaip tai aprašyta gamintojo instrukcijose.
- Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Šis simbolis nurodo, kad reikia naudoti specifinį atjungiamą maitinimo tiekimo bloką prietaiso pajungimui prie maitinimo. Maitinimo tipo nuoroda pažymėta ant šio bloko netoli simbolio.



Atsargumo priemonės

Tam, kad būtų sumažinta sužalojimo, gyvybės praradimo, nusikrėtimo elektra, gaisro ir nuosavybės pagadinimo rizika, laikykitės šiuo atsargumo priemonių.

Simbolių paaiškinimai

Šie simboliai naudojami tam, kad būtų klasifikuojamas ir aprašomas pavojaus lygis, sužalojimai, nuosavybei padaroma žala, kada nesilaikoma nurodymų arba prietaisas naudojamas netinkamai.



PAVOJUS!

Nurodo potencialų pavojų, dėl kurio galimi rimti ar mirtini sužalojimai.



DĖMESIO!

Nurodo potencialų pavojų, dėl kurio tikėtini rimti ar mirtini sužalojimai.



ATSARGIAI!

Nurodo pavojų, dėl kurio galimi nedideli sužalojimai arba nuosavybės apgadinimas.

Šie simboliai yra naudojami tam, kad klasifikuotų instrukcijų tipą, kurių reikia laikytis.



Šis simbolis naudojamas tam, kad įspėtų naudotojus apie specifinę veikimo procedūrą, kurios negalima atlikti.



Šis simbolis naudojamas tam, kad įspėtų naudotojus apie specifinę veikimo procedūrą, kurią būtina negalima atlikti.



DĖMESIO!

► Nelaimingų atsitikimų prevencija



Nelaikykite vaikams ar kūdikiams pasiekiamoje vietoje. Neleiskite jiems juo naudotis.

- Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą arba susižalojimą dėl nuimamų dalių prarajimo.

► Maitinimas



Neatjunginėkite ir neįjunginėkite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Dėl to galite nusikrėsti elektra arba susižaloti.

Nemerkite įkroviklio į vandenį, neplaukite jo vandeniu.

Nedėkite įkroviklio virš arba šalia vandens pripildytos kriauklės arba vonios.

Nesinaudokite šiuo prietaisu jei apgadintas jo maitinimo laidas arba jei lizdas laisvas.



Negadininkite, nemodifikuokite, stipriai nelankstykite ir nevyniokite, neperlenkite maitinimo laido.

Nedėkite ant jo jokių sunkių daiktų, neprispauskite laido.

- Dėl to galite nusikrėsti elektra arba sukelti gaisrą dėl trumpo jungimo.



Nenaudokite nieko kito, išskyrus pridedamą įkroviklį. Taip pat neįkraudininkite kitų produktų su pridedamu įkrovikliu.

- Dėl to galite sukelti nudegimą arba gaisrą dėl trumpo jungimo.



DĖMESIO!



Nenaudokite taip, kad viršytumėte namų ūkio maitinimo tinklo parametrus.

- Jei viršysite šiuos parametrus pajungdami daug prietaisų į vieną lizdą, galite sukelti gaisrą dėl perkaitimo.



Visada užtikrinkite, kad prietaisu būtų naudojamasi maitinant jį iš tinklo, kuris atitinka įkroviklio įtampą. Iki galo įstatykite maitinimo kištuką.

- Jei to nepadarysite, galite sukelti gaisrą arba nusikrėsti elektra.

► Netinkamo veikimo arba anomalijos atveju

Nedelsdami nutraukite naudojimąsi prietaisu ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo pastebėję anomaliją ar gedimą.

- Jei to nepadarysite, galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra arba susižaloti.

<Anomalijos arba gedimo atvejai>



• Prietaisas arba įkroviklis deformuotas arba neįprastai karštas.

• Prietaisas arba įkroviklis skleidžia degėsių kvapą.

• Girdisi neįprastas garsas naudojimo arba įkrovimo metu iš prietaiso ar įkroviklio.

- Nedelsdami paprašykite patikros arba remonto įgaliotame remonto centre.

► Šis produktas



į šį produktą yra integruotas įkraunamas akumuliatorius. Neišmeskite į liepsną ar karštį.

- Dėl to gali pratekėti skystis, perkaisto arba sprogti.



Nemodifikuokite ir neremontuokite.

- Dėl to galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra arba susižaloti. Susisiekite su įgaliotu remonto centru dėl remonto (baterijos keitimo ir t.t.).



Niekada neardykite, išskyrus išmetant produktą.

- Dėl to galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra arba susižaloti.

► Valymas



Visada ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo prieš valydami krautuvą.

- Jei to nepadarysite, galite nusikrėsti elektra arba susižaloti.



Reguliariai valykite maitinimo kištuką, kad apsaugotumėte nuo dulkių susikaupimo (kartą per pusmetį).

- Jei to neatliksite, gali kilti gaisras dėl izoliacijos praradimo ar drėgmės.

Atjunkite maitinimo kištuką ir nušluostykite sausa šluoste.



Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, sensorine arba protine negalia, arba nepakankamomis žiniomis dėl naudojimosi tokiais prietaisais, išskyrus atvejus, jei tokiais asmenis naudojimosi metu prižiūri ir jiems nurodymus duoda asmuo, kuris atsako už jų saugą. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

- To nepadarius gali kilti nelaimingas atsitikimas, susižalojimai.




Maitinimo laidas yra nekeičiamas. Jei laidas pažeistas, įkroviklis turi būti išmestas.


- To nepadarius gali kilti nelaimingas atsitikimas, susižalojimai.

ATSARGIAI!

► **Kaip išvengti žalos dantims ir dantenoms**

 Žmonės, kurie negali operuoti, negali naudotis ir šiuo prietaisu. Žmonės su silpnais peroraliniais pojūčiais neturėtų naudotis šiuo prietaisu.


- Tai gali pakenkti dantims ir dantenoms, jas sužaloti.


 Žmonės, kurie turi periodontitinių ligų, kuriems buvo gydyti dantys, arba jei susirūpinę šiais simptomais burnoje turi pasikonsultuoti su odontologu prieš naudojimą.

- Jei to nepadarysite, galite susižeisti dantis ir susižaloti dantenas.

► **Šis produktas**

Niekada nenaudokite kitais tikslais, nei burnos valymui.

 - Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą, galite susižaloti, kada vandens srovė nukreipta į akis, nosį, ausis ar gerklę.

 **Nepilkite į bakelį vandens karštesnio nei 40 °C.**


- Tai gali sukelti nudegimus.

 **Nesidalinkite antgaliais su šeima ar kitais asmenimis.**

- Tai gali sukelti infekciją arba uždegimus.

► **Pastaba šių atsargumo priemonių**

Neleiskite metaliniams daiktams ar šiukšlėms prilipti prie maitinimo kištuko.

 - Dėl to galite nusikrėsti elektra arba sukelti gaisrą dėl trumpo jungimo.

 **Nenumeskite ir nesutrenkite.**

- Dėl to galite susižaloti.

 **Nevyniokite laido aplink įkroviklį sandėliuojant.**

- Tai gali sugadinti laidą dėl apkrovos, jis gali sukelti gaisrą arba trumpą jungimą.



Atjunkite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo jei nesinaudojate prietaisu ilgą laiką.

- Jei to nepadarysite, galite nusikrėsti elektra arba sukelti gaisrą dėl elektros protėkio pablogėjus izoliacijai.



Atjunkite maitinimo laidą laikydami suėmę už kištuko, o ne už laido.

- To nepadarius, tai gali sukelti gaisrą, galite nusikrėsti elektra.



Po naudojimo visada apžiūrėkite ir nuvalykite prietaisą. (žr. 13 psl.).

- To nepadarius gali kilti pavojus Jūsų sveikatai, jeigu bus naudojama be sterilizavimo dėl bakterijų ir pelėsių susidarymo.

► **Įkraunamos baterijos išmetimas**



PAVOJUS!

Ši įkraunama baterija turi būti naudojama išskirtinai tik su šiuo prietaisu. Nenaudokite šios baterijos su kitais produktais.

Neįkraudinkite baterijos po to, kai ją išimsite iš šio produkto.

• Nemeskite į liepsną ir nenaudokite karščio.



• Nelituokite, neardykite ir nemodifikuokite baterijos.

• Saugokite, kad teigiamas ir neigiamas baterijos poliai nesuliestų metalinių daiktų kontaktu.

• Nesinešiokite ir nelaikykite šios baterijos kartu su metaline juvelyrika, tokia, kaip kaklo pakabukai ar plaukų segtukai.

• Niekada nenulupinėkite vamzdžio.

- Dėl to gali pratekėti skystis, perkaisto arba sprogti.

⚠ DĖMESIO!



Kai išimsite įkraunamą bateriją, nelaikykite jos vaikams ir kūdikiams pasiekiamoje vietoje.

- Baterija gali pakenkti kūnui netyčia ją prarijus.
- Jei taip nutiktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jei pratekėtų baterijos skystis, atlikite šias procedūras. Nelieskite akumulatoriaus nuogomis rankomis.


- Baterijos skystis gali sukelti aklumą, jei jo patektų į akis. Netrinkite akių rankomis.
- Nedelsdami nuplaukite švari vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba sužalojimą jei jo patektų ant odos ar drabužių.
- Kruopščiai išplaukite švari vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.



Paskirtis

- Nedėkite druskos, burnos skalavimo skysčio ar kitokių chemikalų į vandens bakelį. Dėl to gali kilti gedimas.
- Nedžiovinkite pagrindinio bloko džiovintuvu arba kaitinamu ventiliatoriumi. Jei tai darysite, galite sugadinti prietaisą arba deformuoti jo dalis.
- Nevalykite skiedikliais, benzinu, alkoholiu ir t.t. Dėl to gali prietaisas sugesti, įskilti, dalys gali pakeisti spalvas.
- Laikykite prietaisą tokioje vietoje, kur mažai drėgmės po naudojimo. Jei prietaisą paliksite vonioje, tai gali sukelti gedimą.

Dalių identifikavimas

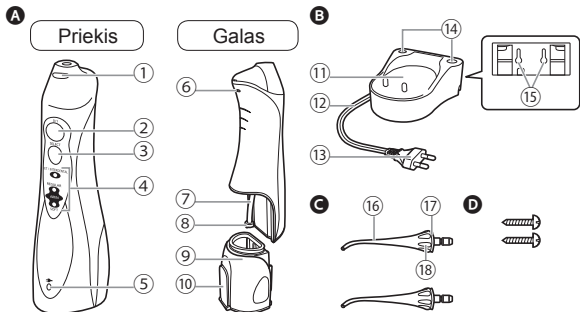

A Pagrindinis blokas

- 1 Purkštuko atleidimo mygtukas
- 2 Maitinimo mygtukas [0/1]
- 3 Režimo jungiklis
- 4 Režimo indikatorius
- 5 Įkrovimo indikatorius
- 6 Ventiliacijos anga
- 7 Siurbimo žarna
- 8 Filtras
- 9 Vandens bakelis
- 10 Vandens bakelio dangtelis

B Įkroviklis (RE8-47/RE8-53) (Maitinimo kištuko forma pagal regioną gali būti skirtinga.)

C Purkštukas (x2)

- 11 Įkrovimo skyrius
- 12 Laidas
- 13 Maitinimo kištukas
- 14 Varžtų skylės montavimui ant sienos
- 15 Šis įkroviklis gali būti montuojamas ant sienos naudojant du medžio varžtus.
- 16 Purkštukas
- 17 Identifikavimo žiedas
- 18 Purkštuko rankena

D 2 varžtai


Pastaba

Pagrindinio bloko viduje gali likti drėgmės (vandens bakelyje ir siurbimo žarnoje) nuo distiliuoto vandens, kuris naudojamas produkto testavimui.

Įkrovimas

► Ant vonios krašto arba lentynos


1. Dėkite laidą į kairę arba į dešinę, arba kreipiklio centre, priklausomai nuo to, kur laikomas įkroviklis.
2. Dėkite įkroviklį ant saugaus, lygaus paviršiaus.
3. Įkiškite maitinimo kištuką.

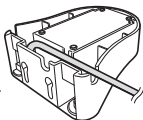

1 Įkiškite pagrindinį kištuką taip, kad jis įkrovimo skyriuje stovėtų stačiai.

Ims šviesti įkrovimo indikatorius.

- Įsitikinkite, kad pagrindinis blokas pastatytas iš viršaus į apačią. Jei pagrindinė įranga pakreipiama arba nėra tiesioginiame kontakte su įkrovikliu, pagrindinis blokas tinkamai neįsikraus.
- Įkrovimas atliekamas per maždaug 15 valandų.
- Lemputė neužgesta net tada, kai baigiamas įkrovimas.
- Pagrindinis blokas suteiks veikimą apytiksliai 15 minučių, kada jis naudojamas visiškai įkrautas. (Veikimo trukmė taps trumpesne, kadangi baterijos tampa senesnėmis.)

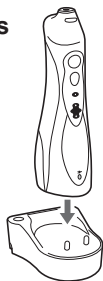

2 Atjunkite maitinimo kištuką, kada bus baigtas įkrovimas.

- Tai neturės įtakos baterijos veikimui net jei ji įkraudinėjama daugiau nei 15 valandų.

Pastabos

- Naudojant prietaisą pirmą kartą arba jei jis buvo nenaudojamas ilgiau, nei pusmetį, įkrovimo indikatorius gali nešviesti net iki kelių minučių po pakrovimo pradžios arba veikimo laikas gali būti trumpesnis. Tokiais atvejais įkraudinėkite bateriją 23 valandas arba ilgiau.
- Rekomenduojama aplinkos temperatūra yra 0 – 35 °C. Baterijos veikimas gali suprastėti už šios rekomenduojamos temperatūros ribų.

Kaip naudotis

1 Pritvirtinkite purkštuką tvirtai ant pagrindinio bloko.



2 Uždėkite vandens talpos dangtelį, palaikykite pagrindinį bloką, kol jis išsilygiuos ir tada pripildykite talpą vandeniu.

- Visada naudokite naują krano vandenį arba drungna vandenį.
- Jei vanduo jaučiasi per šaltas, naudokite šiltą vandenį su temperatūra 40 °C arba mažiau.





3 Uždarykite vandens bakelio dangtelį užtikrindami, kad jis fiksuojasi vietoje.



4 Paspauskite režimo mygtuką ir pasirinkite norimą vandens čiurkšlės režimą.

- Režimo indikatorius mirksės anksčiau pasirinktame režime. Jei prietaisu nesinaudojama daugiau nei 30 dienų arba jei jis buvo išsikrovęs ilgesnį laiką, režimas inicijuojamas į AIR IN (SOFT). (Kai baterija išsekusi, režimas bus anuliuotas, bet tai nėra gedimas.)
- Jei norite matyti skirtingą režimą, spauskite režimo jungiklio mygtuką, kol bus pakeista į norimą nustatymą. Spaudžiant režimo mygtuką kelis kartus pasikeis režimas iš AIR IN (SOFT) ir AIR IN (REGULAR) į JET ir INTERDENTAL.

Režimas	Aprašymas
 JET / INTERDENTAL REGULAR AIR IN SOFT	INTERDENTAL režimas (indikatorius mirksi) <ul style="list-style-type: none">• Pilnai užpildytas vandens bakelis suteikia 2 minutes naudojimo. Šis režimas skirtas koncentruotai priežiūrai zonose tarp dantų su pertrūkine vandens srove.
 JET / INTERDENTAL REGULAR AIR IN SOFT	JET režimas (indikatorius mirksi) <ul style="list-style-type: none">• Pilnai užpildytas vandens bakelis užtikrina apie 35 sekundžių naudojimą. Šis režimas yra skirtas koncentruotam naudojimui zonoms tarp dantų su stipriu vandens srautu.
 JET / INTERDENTAL REGULAR AIR IN SOFT	AIR IN (REGULAR) režimas <ul style="list-style-type: none">• Šis režimas skirtas periodontinei kišenei ir dantėnų priežiūrai.
 JET / INTERDENTAL REGULAR AIR IN SOFT	AIR IN (SOFT) režimas <ul style="list-style-type: none">• Šis režimas skirtas švelniam dantėnų masažui.

Pastabos


- Kai naudojate prietaisą pirmą laiką, spauskite maitinimo mygtuką tam, kad įjungtumėte prietaisą ir išbadytumėte kiekvieną iš vandens srovių esant užpildytam bakeliui.
- Prietaisas gali neveikti tinkamai esant aplinkos temperatūrai 5 °C ir žemesnei.
- Nespauskite purkštuko galiuko tvirtai prie dantų arba dantėnų.
- Kadangi tam tikrų prie dantų prilipusių apnašų nuvalyti neįmanoma tik vandeniu, visada reikia šveisti šepetėliu. Rekomenduojama valyti burnos vidų vandeniu ir tada valyti dantis šepetėliais.
- Nenaudokite pagrindinio prietaiso, kada jis tuščias, išskyrus atvejus, kada išpilamas likęs vanduo po naudojimo. Jei naudositės prietaisu be vandens, galite jį apgadinti.

5 Uždėkite antgalį ir pridėkite jį prie burnos ir arti burnos švelniai spausdami maitinimo jungiklį.

- Norėdami naudoti, pakiškite veidą virš vandens kriauklės ir tada su pagrindiniu bloku į viršų ir purkštuku ant viršaus, pakelkite savo alkūnę.
- Spaudžiant režimo mygtuką naudojimosi metu bus perjungiamas režimas.
- Jei purkštukas per daug palenkiamas, vanduo išteks iš vėdinimo zonos skylės vietoje purkštuko skylės. (Ventiliacijos ertmė pagrindinės įrangos gale leidžia pagrindiniam blokui lengviau siurbti vandenį per žarną.)



Sukite purkštuko rankenėlę norėdami reguliuoti vandens srauto kryptį.

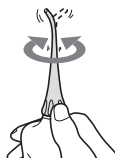

6 Po naudojimo paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte maitinimo bloką.

- Sustabdykite veikimą su purkštuku tebesant burnoje tam, kad apsaugotumėte vandenį nuo tiškimo.

► Erdvės tarp dantų valymas

(Valyti su vienu vandens bakelio užpildymu)

Esant **INTERDENTAL** režime

- Nukreipkite vandens srautą į \triangle zoną tarp dantų.
- Pereikite prie sekančios erdvės tarp dantų, kol vandens srovės srautas sustabdytas.
- Nukreipkite nuo priekinės ir galinės šoninės dantų dalies.
- Pilnai užpildytas vandens bakelis suteikia 2 minutes naudojimo.



(Valyti dideliu vandens kiekiu)

JET režime

- Nukreipkite vandens srautą į \triangle zoną tarp dantų.
- Nukreipkite nuo priekinės ir galinės šoninės dantų dalies.
- Pilnai užpildytas vandens bakelis užtikrina apie 35 sekundžių naudojimą.



► Tarpdančių kišenių valymas

Esant **AIR IN (REGULAR)** režime

- Nukreipkite vandens srautą ties tarpu tarp danties ir dantenos.
- Lengvai pakeiskite vandens srautą išilgai dantenos.
- Išvalykite dantų priekį ir galą, taip pat ir už dantų sienelių.
- Nuvalykite susijusias dantenu vietas būdami **AIR IN (SOFT)** režime.
- * Nevalykite tarpdančių kišenių **JET** režimu, nes vandens srauto stiprumas bus per didelis.



► Dantenu priežiūra


Esant **AIR IN (REGULAR)** režime

- Stimuliuokite danteną.
- Švelniai stimuliuokite rūpimas tarpdančių vietas **AIR IN (SOFT)** režime.



Po naudojimo

1. Atidarykite vandens dangtelį ir išpilkite vandenį.

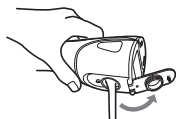


2. Išjunkite maitinimo jungiklį ir išleiskite vandenį.

- Dirbkite, kol nebebus matoma vandens ir tada išjunkite maitinimo jungikliu.



3. Pastatykite pagrindinį bloką į įkroviklį.

4. Spausdami purkštuko atleidimo mygtuką, nuimkite purkštuką nuo pagrindinio bloko ir uždėkite jį ant stovo.

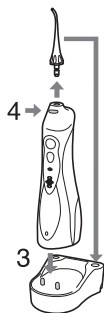

Valymas

1. Nutraukite vandens indelį žemyn.




2. Valykite vandeniu.



- Nuimkite identifikavimo žiedą ir valykite vandeniu.
- Neplaukite karštu vandeniu per 50 °C.
- Jei naudojama valymo priemonė, naudokite tinkamą indų plovimui. Praskalaukite gerai vandeniu siekdami užtikrinti, kad neliks jokios valymo priemonės po plovimo.
- Nuvalykite drėgmę rankšluosčiu ir palikite džiūti gerai vėdinamoje vietoje.

Nugrandykite filtrą ties siurbimo žarnos galiuku naudodami minkštą šepetį.

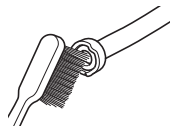

3. Nuvalykite vandenį naudodami rankšluostį ir t.t. ir išdžiovinkite.

4. Sulygiuokite ir slinkite vandens bakelį išilgai griovelio ir sumontuokite jį saugiai.



Naudokite šluostę norėdami nuvalyti dėmes nuo įkroviklio.

- Niekada nenaudokite skiediklių, benzino, alkoholio, nes tai gali sukelti gedimus arba dalių įtrūkumus/spalvos praradimą.
- Nevalykite įkroviklio vandeniu.
- Kartą per šešis mėnesius nuvalykite maitinimo kištuko šakutės kontaktus sausu skudurėliu.



Dažnai užduodami klausimai

Klausimas	Atsakymas
Ar baterija bus išsikrovusi po ilgo nenaudojimo laiko?	▶ Jei prietaisas nenaudojamas 6 mėnesius ar ilgiau, baterija gali išsikrauti (pratekėti baterijos skystis ir pan.). Pilnai įkraukite bateriją bent kartą per 6 mėnesius.
Ar baterija gali būti įkraunama iš naujo prieš kiekvieną naudojimą?	▶ Taip, tačiau rekomenduojame įkrauti tada, kai ji išsenka. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo jos naudojimo ir laikymo sąlygų.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Veiksmas
Prietaisas neveikia.	▶ Jūs ką tik įsigijote produktą arba juo nebuvo naudojama ilgiau nei 6 mėnesius. ▶ Įkrovimo laikas trumpas.	▶ Įkraukite prietaisą bent 23 valandas. (žr. 10 psl.).
Prietaisas gali būti naudojamas tik kelias minutes, net jei jis įkrautas.	▶ Pagrindinis prietaisas nestovi stačiai įkroviklyje. (žr. 10 psl.). ▶ Baterijos tarnavimo laikas baigėsi (apie 3 metus).	▶ Pastatykite pagrindinį bloką aukštyr taip, kad jo kontaktai susisiektų su įkroviklio skyriumi. ▶ Baterija pasiekė savo tarnavimo laiko pabaigą. (žr. 15 psl.).
Vandens slėgis žemas.	▶ Purkštukas užsikimšęs. ▶ Purkštuko burna suspausta. ▶ Užsikimšęs purkštukas.	▶ Pakeiskite purkštuką. ▶ Išvalykite filtrą. (žr. 13 psl.).
Neiššina vanduo.	▶ Pagrindinis blokas per daug pakreiptas naudojimo metu.	▶ Naudokite, kad pagrindinis blokas būtų vertikalioje būklėje. (žr. 11 psl.).

Jeigu problemų iki šiol nepavyksta išspręsti, susisiekite su parduotuve, kurioje pirkote prietaisą arba „Panasonic“ įgaliotu remonto centru.

Baterijos tarnavimo laikas

Baterijos tarnavimo laikas yra apie 3 metus kada įkraudinėjama apie kartą per savaitę (kada naudojama vieno asmens). Jei veikimo laikas žymiai trumpesnis net po pilno įkrovimo, reiškia, kad baterijos tarnavimo laikas baigėsi. (Baterijos veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir laikymo sąlygų) bateriją turi keisti tik įgaliotas techninio aptarnavimo centras.


Integruotos baterijos išėmimas

Išimkite integruotą įkraunamą bateriją prieš išmesdami prietaisą.

Užtikrinkite, kad baterija būtų išmetama į specialiai tam skirtą vietą, jei tokia yra.

Šis paveikslėlis turi būti naudojamas išmetant prietaisą, jis neturi būti naudojamas jo remontui. Jei išardysite prietaisą patys, jis daugiau nebebus atsparus vandeniui, dėl ko jis gali sugesti.

- Nuimkite prietaisą nuo įkroviklio kada išimate bateriją.
- Paspauskite galios jungiklį norėdami įjungti maitinimą tol, kol baterija bus visiškai iškrauta.
- Atlikite žingsnius ① – ⑥ ir iškelkite bateriją, tada ją išimkite.
- Saugokite, kad neužtrumpintumėte teigiamo ir neigiamo išimtos baterijos polių, izoliuokite jos terminalus ant jos užklijuodami juosteles.

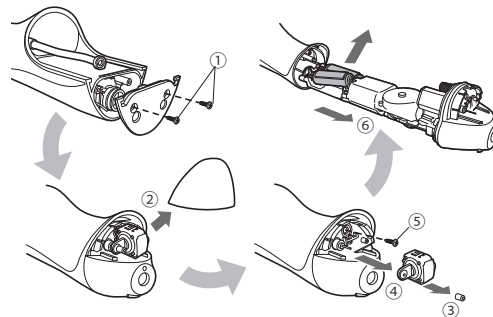

Dėl aplinkos apsaugos ir medžiagų perdirbimo

Šiame prietaise yra naudojama nikelio–metalo hidrido baterija. Užtikrinkite, kad baterija būtų išmetama į tam oficialiai skirtą vietą, jei tokia Jūsų valstybėje yra.

Specifikacijos

Maitinimo šaltinis	Žr. pavadinimo plokštelę ant produkto (Automatinis įtampos keitimas)
Įkrovimo laikas	Apie 15 valandų
Energijos sąnaudos	Apie 1 W
Siurblio dažnis	1 400 impulsų per minutę*
Vandens slėgis	INTERDENTAL: Apie 590 kPa (apie 6,0 kgf/cm ²) JET: Apie 590 kPa (apie 6,0 kgf/cm ²) AIR IN (REGULAR): Apie 390 kPa (apie 4,0 kgf/cm ²) AIR IN (SOFT): Apie 200 kPa (apie 2,0 kgf/cm ²)
Veikimo laikas	Apie 15 minučių*, apie 60 minučių** (esant 20 °C, kada pilnai įkrauta)
Bakelio talpa	Apie 130 mL (apie 35 sekundes*, apie 120 sekundžių**)
Matmenys	Pagrindinis blokas: 197 (A) x 59 (P) x 75 (G) mm (Neįskaitant purkštuko) Įkroviklis: 40 (A) x 93 (P) x 98 (G) mm
Masė	Pagrindinis blokas: Apie 305 g (įskaitant purkštuką), Įkroviklis: Apie 180 g
Ore esantis triukšmas	65 (dB (A) re 1 pW)

* Naudojant AIR IN (REGULAR) režimą

** Naudojant INTERDENTAL režimą

Šis produktas skirtas tik namų apyvokos reikmėms.

Purkštuko keitimas (parduodama atskirai)


- Jei purkštuko galiukas deformuojasi, pakeiskite jį nauju purkštuku.
- Purkštukas yra susidėvintis. Purkštukas turi būti keičiamas nauju kas 6 mėnesius arba dėl higienos priežasčių, net jei jo forma nepasikeitusi.



Naujas purkštukas
(antgalis)



Deformuotas (susidėvėjęs)
purkštukas (antgalis)

Dalies numeris	Keičiamas antgalis, skirtas EW1411	
EW0950	Purkštukas	

Atitarnavusios įrangos ir baterijų išmetimas

Tik Europos Sąjungos valstybėms ir valstybėms su



perdirbimo sistemomis

Šie simboliai ant produktų, pakuočių ir/arba pridėdamuose dokumentuose reiškia, kad atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga bei baterijos negali būti išmetamos kartu su bendromis buitinėmis atliekomis.

Dėl tinkamo senų produktų ir baterijų apdorojimo, surinkimo ir perdirbimo – pristatykite jas į atitinkamus surinkimo taškus pagal savo valstybės nacionalinius teisės aktus.

Jūs tinkamai išmesdami padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugoti gamtą bei žmonių sveikatą nuo kenksmingo poveikio.

Dėl išsamesnės informacijos apie surinkimą ir perdirbimą kreipkitės į savo savivaldybę.

Atminkite, kad dėl netinkamo atliekų išmetimo pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus gali būti taikomos nuobaudos.

Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinis simbolis)

Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su chemikalų simboliu. Šiuo atveju tai atitinka reikalavimus, kurie nustatyti susijusių chemikalų direktyvoje.



„Panasonic“ gaminys

Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite
atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2015