


Parafino vonelė SD-52

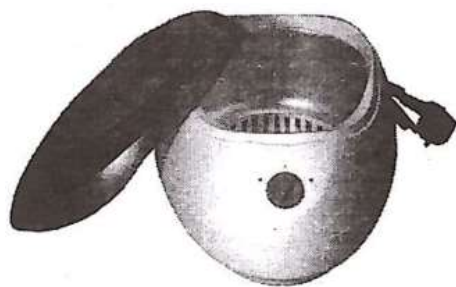

Techniniai duomenys:

Galingumas: 200 W.
Elektros įtampa: 100–240V/50–60 Hz.
Vaško lydymos temperatūra: 70°C.
Talpa: 3000 ml.
Sertifikatai: CE, ROHS.

Naujo dizaino parafino vonelė SD-52 yra didelės talpos ir gali būti naudojama tiek rankų, tiek kojų procedūroms.

Procedūros nauda:

1. Parafino procedūros minkština ir švelnina odą, neleidamos jai sausėti, senti ir tapti šiurkščiai, ypač žiemą.
2. Ši procedūra yra labai populiari visame pasaulyje dėl paprasto atlikimo ir tobulo efekto.
3. Lyginant su kitomis odos priežiūros procedūromis, parafino procedūros dėka jūsų oda taps glotni ir sudrėkinta akimirksniu, vos tik įmerksite rankas ar kojas į šiltą parafiną.
4. Ši procedūra pagerina kraujotaką ir medžiagų apykaitą.
5. Procedūros metu pašalinamos negyvos odos ląstelės, šiurkšti ir sausa oda sušvelninama, sudrėkinama ir atpalaiduojama.

Naudojimas:

1. Pirmiausia nusiplaukite rankas ar kojas.
2. Įdėkite į vonelę parafino. Įkiškite jungtuką į el. tinklą ir įjunkite prietaisą.
3. Parafinui ištirpus, patikrinkite jo temperatūrą. Jei ji tinkama, merkite į parafiną ranką ar koją. Ištraukite ir užsimaukite plastikinę pirštinę ir medvilninę pirštinę, kad maitinantis parafino efektas geriau suveiktų. Parafinas sušildys odą ir stimuliuos kraujo cirkuliaciją. Palaukite apie 20 minučių.
4. Po procedūros, nuimkite plastikinę ir medvilninę pirštinę. Parafinas gali būti naudojamas vėl, kai jis sustingsta.
5. Išjunkite prietaisą ir ištraukite iš maitinimo lizdo.

Įspėjimas: neatlikite parafino procedūros, jei oda yra pažeista.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt